

LOJER®

Il corpo umano personifica le caratteristiche dell'alta tecnologia presenti in natura, combinando funzionalità estremamente complesse con proprietà personali uniche. Ecco perché la sua riparazione e conservazione sono compiti che richiedono un trattamento da parte di professionisti dotati di attrezzature speciali.

manuthera®₂₄₂

LA NUOVA DIMENSIONE NEI TRATTAMENTI DI MOBILIZZAZIONE E MANIPOLAZIONI



Diagnosi più accurate ed efficienti

Massimo comfort e sicurezza per il paziente

Maggior efficienza e standard ergonomici elevati

Funzioni che consentono nuovi metodi di trattamento

Progettato da esperti, il lettino più versatile al mondo

Grazie alla tecnologia moderna ed unica adottata dagli esperti progettisti finlandesi, il Manuthera® 242 supporta il lavoro dei terapisti durante manipolazioni e mobilizzazioni assicurandosi la miglior diagnosi ed il miglior trattamento possibile per i pazienti.


Manuthera 242 è un lettino per trattamenti all-in-one, per valutazione e trattamento anche più impegnativi e viene utilizzato da terapisti manuali appartenenti a varie categorie, come fisioterapisti, naprapati, osteopati, massaggiatori sportivi, OMT e chiropratici. Il Manuthera 242 innalza il lavoro del terapeuta ad un nuovo livello e supporta innumerevoli metodi di trattamento e diagnosi grazie al suo sistema di funzionamento brevettato basato su due motori sincronizzati, caratteristiche uniche a multi-trazione, e molte altre funzionalità, così come alla sua struttura. Il paziente può essere spostato in posizioni chiave terapeutiche ed anatomiche in modo semplice e delicato. Il trattamento può essere effettuato 3-dimensionalmente utilizzando la trazione, la flessione, la flessione laterale, la rotazione nonché la gravità. Il design del lettino, il sistema a doppio motore ed il telaio con cuscinetti a sfera presenti in tutte le parti mobili migliorano l'ergonomia del lavoro del terapeuta e lo rendono meno faticoso, consentendo così anche migliori risultati.

Eccellente esperienza durante il trattamento per il paziente

Il Manuthera 242 offre al paziente un'esperienza eccellente durante il trattamento. Grazie alla struttura robusta, al design anatomicamente piacevole, alle imbottiture, nonché alla superficie facile da pulire, il comfort del paziente viene mantenuto durante tutti i tipi di trattamento.

Il movimento del lettino è simile a quello della colonna vertebrale del paziente, e non sarà più necessario per il terapeuta sollevare o ruotare il paziente. Questo movimento fluido e naturale permette un trattamento privo di dolore e rilassante. Un'esperienza piacevole durante il trattamento consente un maggior numero di ripetizioni e, di conseguenza, risultati migliori.

Grazie alla funzione di inclinazione elettronica, anche i pazienti con gravi disabilità possono salire facilmente sul lettino. La tecnologia è stata progettata per supportare la flessibilità necessaria a trattamenti di tipo diverso e per fare in modo che il paziente non abbia bisogno di scendere dal lettino durante il trattamento.

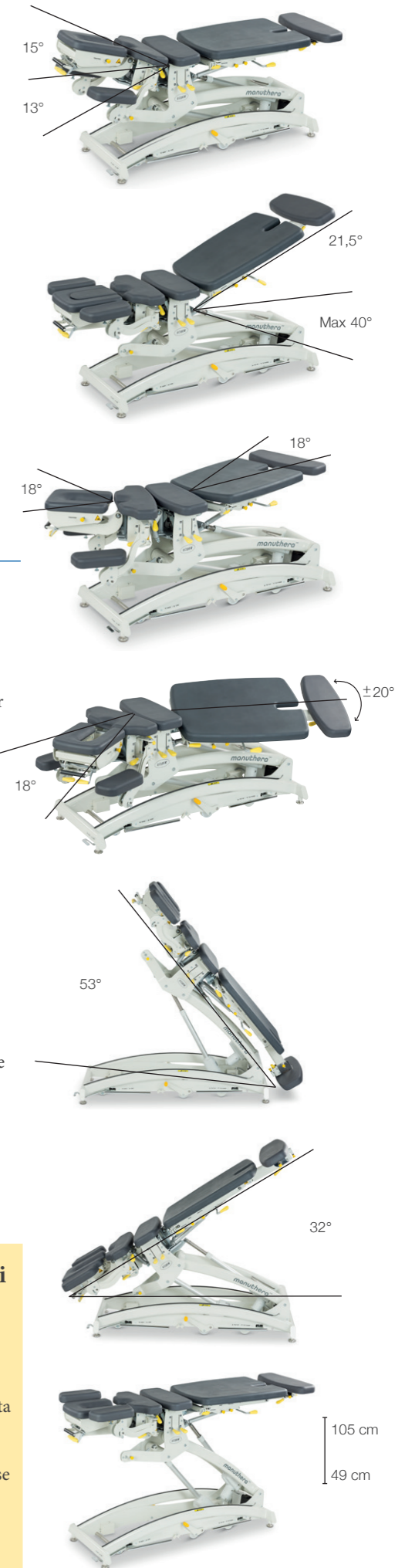

Caratteristiche straordinarie per offrire il meglio al paziente

Sezione per il volto pieghevole in due direzioni e dotata di funzionalità 3D avanzate per una mobilizzazione più sicura del rachide e del collo attraverso un movimento laterale e verticale della testa.

Braccioli con regolazione dell'altezza e del movimento laterale. I braccioli possono essere attaccati di lato per fungere da supporto laterale

Facile da usare, robusto e dotato di manopole ergonomiche di bloccaggio del movimento nella posizione desiderata.

Il bordo di sicurezza impedisce a tutte le regolazioni del lettino di essere toccate

Piedini regolabili con gambe di supporto

Ampia regolazione Alto-basso

Ruote bloccabili per maggior facilità di movimento

NEW Funzione elettronica di inclinazione up/down per trattamento basato sulla gravità; agevola inoltre la salita del paziente sul lettino. La decompressione spinale non è mai stata così efficace e piacevole per il paziente!

Sezione parte inferiore del corpo con estensione/flessione, movimento laterale e movimento di rotazione 3D. **NEW** funzione di rotazione parte inferiore del corpo.

Sezione piedi Multi-posizione: posizione verticale, poggipiedi disponibile da sdraiato, e funzione "scalino per salire".

Materiale morbido facile da pulire, durevole, biocompatibile.

NEW Funzione Drop. Nuova tecnologia: drop in trazione, che rende più facile e varia la manipolazione dell'area delle anche.

Supporti di blocco totali anteriori e posteriori forniscono un sostegno supplementare per le tecniche di trattamento più faticose e rendono il lettino molto robusto in ogni sezione.

Manuthera 242 con motori di sollevamento sincronizzati

Manuthera 242 è il primo lettino al mondo dotato di due motori di sollevamento sincronizzati. Questa caratteristica facilita il lavoro del terapeuta che può effettuare di conseguenza movimenti più semplici e fluidi. La funzione di sicurezza automatica rileva se qualcosa rimane intrappolato tra le strutture, arrestando così i motori e sollevando il lettino al fine di rilasciare l'ostruzione.

Manuthera® 242 – for the advanced professional


Manuthera 242 è stato progettato per supportare il lavoro del terapeuta in vari modi:

- Design finlandese eterno per una maggiore ergonomia
- Possibilità di trattamenti evoluti grazie alle funzionalità 3D e a trazione multipla
- Funzioni motorizzate ottimizzate per ridurre la necessità di procedure faticose
- Diverse opzioni di movimento per ogni segmento
- Funzionalità per sostenere metodi di trattamento ad impatto profondo
- I cuscinetti a sfera nelle giunture del lettino garantiscono un movimento fluido e la resistenza durante elevati volumi di utilizzo
- Di facile manutenzione, dotato di materiali durevoli
- Facile da spostare
- Piacevole esperienza di trattamento per i pazienti
- Elevato valore di rivendita
- 2 anni di garanzia del produttore


NEW

| | Manuthera 242 | Manuthera 241 |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Sezioni parte torace | 2 | 1 |
| Regolazione in altezza (Hi-Lo) | 49-105cm | 53-89cm |
| Peso | 170kg | 128kg |
| Funzione inclinazione verso il basso | Elettronico | Manuale |
| Funzione inclinazione verso l'alto | Elettronico | Manuale |
| Rotazione sezione inferiore del lettino | SI | NO |
| Funzione blocco tot. parte superiore | SI | NO |
| Funzione blocco totale parte inferiore | SI | NO |
| Ruote | 2 | 4 |
| Portata massima | 150kg | 160kg |
| Motore di sollevamento (push only) | 2 | 1 |
| Funzioni Drop | Normal Drop e Drop a trazione | Drop a trazione |
| Funzione anti- schiacciamento automatica | SI | NO |
| Bordo sicurezza arresto movimento | SI | NO |
| Sezione inferiore dei piedi regolabile | SI | NO |
| Funzione blocco sicurezza | automatico 2 ore | manuale con leva |
| Superficie lettino | morbida a stampo | Plastica espansa e pelle artificiale |
| Sezione testata forma a U | SI | NO |
| Copri foro naso-bocca | SI | NO |
| Manufacture | Finlandia | Finlandia |

Manuthera 242
Maximum width 54 cm

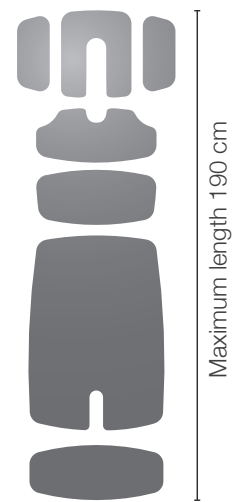

Manuthera 241
Maximum width 57 cm

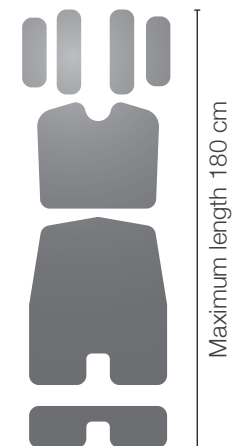

Per maggiori informazioni riguardo questo prodotto, ricevere un'offerta o conoscere le varie proposte di finanziamento, leasing o noleggio: www.abilitygroup.it



ABILITY GROUP SRL | Partner esclusivo Lojer per l'Italia
Tel. 041 5906636 | info@abilitygroup.it | www.abilitygroup.it
MOGLIANO VENETO (TV) Via Torricelli 17, 31021



Manuthera is a registered trademark of Lojer Oy. Manuthera 242 mobilisation and manipulation tables are made by Lojer Oy, a Finnish company designing, manufacturing and marketing high-class tools and equipment for healthcare and wellness services in Finland and globally.